



EN
General contact details
E-mail: info@neuromoddevices.com

Customer support contact details
E-mail: techsupport@neuromoddevices.com

Web: www.neuromoddevices.com

ES
Datos generales de contacto
Correo electrónico: info@neuromoddevices.com

Datos de contacto del Servicio de Atención al Cliente
Correo electrónico: techsupport@neuromoddevices.com

Sitio web: www.neuromoddevices.com

PT
Dados gerais de contacto
E-mail: info@neuromoddevices.com

Dados de contacto do Apoio ao cliente
E-mail: techsupport@neuromoddevices.com

Web: www.neuromoddevices.com

PL
Ogólne dane kontaktowe
Adres e-mail: info@neuromoddevices.com

Dane kontaktowe obsługi klienta
Adres e-mail: techsupport@neuromoddevices.com


Witryna internetowa: www.neuromoddevices.com

HU
Általános elérhetőségi adatok
E-mail: info@neuromoddevices.com

Ügyfélszolgálat elérhetősége
E-mail: techsupport@neuromoddevices.com

Web: www.neuromoddevices.com

Neuromod Devices Limited,
Rainsford St., Dublin,
D08 R2YP, Ireland.

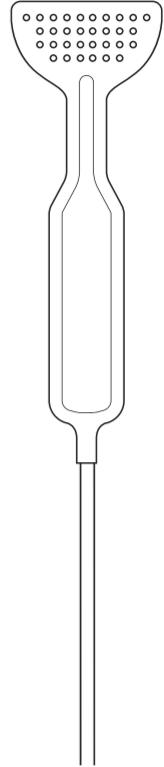

Magyar

Bevetés

Kezelőorvosa a krónikus, szubjektív fülzúgás tüneteinek enyhítésére írt fel Önnel a Lenire® rendszert. Használattól előtér figyelmesen olvassa el a Lenire felhasználói kézikönyvet. Ezek az utasítások megmutatják, hogyan kell használni és ápolni a Tonguetip® TP-101 eszközt. A Tonguetip TP-101 csak a Lenire rendszerrel együtt használható.

Rendeltetésszerű használat

A Tonguetip eszköz a Lenire rendszer tartozéka, és a Lenire rendszerrel való használatra szolgál.

Ellenjavallatok

⚠ Ne használja az eszközt, ha:

- Ha pacemakere, defibrillátor vagy bármilyen más aktív beültetéshető eszköze van, kivéve, ha az orvos másképp nem rendelkezik.
- Ha terhes, kivéve, ha az orvos másképp nem rendelkezik.
- Ha epilepsziaban vagy más olyan betegségben szenved, amely eszméletesztéshez vezethet.
- Ha olyan betegségben szenved, amely a nyelv érzékenységének csökkenését okozza.
- Ha seb, afa vagy gyulladás van a szájüregben, kivéve, ha az orvos másképp nem rendelkezik.

A használathoz kapcsolódó kockázatok

A lenire készülék használataival kapcsolatos lehetséges kockázatok:

- A Tonguetip és a fogszabályozók vagy fémtömörök közötti érintkezés átmeneti kellemetlenséget okozhat.

Lehetőséges, hogy egyeseknél enyhe allergiás reakció léphet fel a készülékben lévő anyagokkal szemben. Megjegyzés: A Tonguetip elektrodái nikkelt tartalmaznak. A kezelés során enyhe zsibbadást vagy kellemetlen érzést tapasztalhat a nyelvén. Ha ez előfordul, csökkentse a nyelvstimuláció erejét. Ha a tünetek továbbra is fennállnak, forduljon kezelőorvosához.

Figyelemzettések

- Ne használja a Tonguetip eszközt által közben, illetve alkohol vagy más, álmosságot okozó szerek hatása alatt.
- A Tonguetip eszköz gyermeketől elzárva tartandó, nehogh véletlentelen lenyeljék azt vagy megfulladtanak tőle.
- A keresztszennyeződés kockázatának elkerülése érdekében a Tonguetip eszközöt nem szabad megosztani más személyekkel.
- Ha a szájüregben sebek, áfták vagy gyulladások vannak, a tünetek megszűnéséig ne használja a készüléket.

A csomag címzéése

- Ne használja, ha a csomagolás sérült.
- Tekintse meg a felhasználói kézikönyvet.
- Az orvostehniki eszközzel kapcsolatos figyelemzettések és övintézkedések.
- A gyártó adatai.
- A készülék téteszáma.
- A készülék modellszáma.

IP67

IP-védelmi osztály: Azt adjja meg, hogy egy burkolat menőnyire hatékony zárt, szigetelt.



A készüléket nem szabad háztartási hulladék között kezelní.



A Tonguetip magas fokú védelmet nyújt az áramütéssel szemben.



Tárolásra és szállításra vonatkozó páratartalom-határértékek. Az alsó határérték 5%, a felső határérték pedig 85%.



Ez a szimbólum az alkalmazandó uniós irányelvnek való megfelelést jelzi.

Műszaki leírás

Olvassa el a Lenire felhasználói kézikönyvét az eszköz műszaki leírásához.

A Tonguetip működési elve

A Tonguetip egy orvostehniki eszköz tartozéka, amely a Lenire vezérlőhöz csatlakoztatva gyengéd elektromos stimulációt biztosít a nyelvnek a nyelv hegycére helyezett elektroádon keresztül. A kezelőorvosa a stimulációs szintet az Ön egyéni beállításának megfelelően hatrozza meg.

Ha a csomagolás sérült, a Tonguetip eszköz nem szabad használni, és vissza kell juttatni az értékesítési pontra.

A Tonguetip első csatlakoztatása és használata előtt azt meg kell tisztítani. A részleteket lásd a tisztításról szóló részben.

IP67

Grado de protección (IP): Describe la eficacia con la que se cierra un envase.

El dispositivo no debe desecharse como residuo doméstico.

El Tonguetip proporciona un alto grado de protección contra las descargas eléctricas.

Límites de temperatura en el almacenamiento y el transporte. El límite inferior es de -20 °C, y el superior, de 45 °C.

Límites de humedad en el almacenamiento y el transporte. El límite inferior es del 5 %, y el superior, del 85 %.

Este símbolo significa que se cumplen las directivas de la UE aplicables.

Descripción técnica

Consulte la descripción técnica del dispositivo en el manual de usuario de Lenire.

Cómo funciona el Tonguetip

Tonguetip es un producto sanitario accesorio que, cuando se conecta al mando Lenire, proporciona una suave estimulación eléctrica en la lengua mediante la colocación de electrodos en la punta de esta. Su médico ajustará el nivel de estimulación a su configuración personal.

Si el envase presenta daños, no deberá utilizar el Tonguetip y deberá devolverlo al punto de venta.

Debe limpiar el Tonguetip antes de utilizarlo y conectarlo por primera vez. Consulte la sección «Limpieza» para obtener más información.

A Tonguetip használata

- Nyissa ki a védőcsomagolást, amelyben a Tonguetip eszközt kaptá.
- A Tonguetip eszközt a vezérlőhöz kell csatlakoztatni úgy, hogy a vezérlőcsatlakozóhoz csatlakoztató.
- A csatlakoztatás után a Tonguetip jelzölámpának villogó kékkel villog a zöld színe kell váltnia.
- A Tonguetip eszközt lefelé nézé elektrodákkal a szájába kell helyezni, közvetlenül a felső elülső fogak mögé (a nyelv tetejére, a száj elülső része felé).
- Ahogy becsmukja a száját, az elektrodáknak érintkezniük kell a nyelv hegyével és kényelmesen kell elhelyezkedniük azon.
- Amikor a nyelv teljesen befelé kontaktus jön létre, a Tonguetip jelzölámpánabbamár a világos (zöld színű) kell világítania anélkül, hogy villogna.

A maximális kényelem érdekében a kezelés időtartama alatt a szájnak és az állkapocsnak csukva, de lazán kell lennie.

Az áramütés és egési sérvélés elkerülése érdekében ne csatlakoztassa a Tonguetip eszközt a Lenire vezérlőtől eltérő készülékezhez.

Az ingerbeállítások megadása

Javasoljuk, hogy a nyelvstimuláció szintjét hagyja az alapértelmezett szinten, kivéve, ha

- A Tonguetip által leadott stimuláció kellemetlen érzést okoz. Ebben az esetben a stimuláció szintje egy kellemes szintre csökkenhető.
- A leadott stimuláció érzete gyengébb, mint amit a készülék előzetes beállításakor érzett. Ebben az esetben a stimuláció szintje növelhető.

Tisztítás

A Tonguetip tisztítása előtt győződjön meg arról, hogy le van választva a vezérlőről.

A Tonguetip csatlakozás vége nem érhet folyadékba.

Ajánlott a Tonguetip eszköz hosszabb tárolás után megtisztítani, valamint olyan körülmenyeknek való kitettségi után, amelyek befolyásolhatják a higiéniát.

1. A Tonguetip eszköz sima vagy desztillált vízzel alaposan le kell öblíteni.

2. A Tonguetip eszközt a leöblítés után azonnal használhati.

3. Ha tisztítás után nem kívánja azonnal használni, helyezze egy tiszta, száraz felületre, és hagyja a levegőn megszárudni.

4. Ezennél a Tonguetip megtisztítható a Tonguetip felületeinek, beleértve az elektrodákat és a csatlakozót, 70%-os izopropil-alkoholba (IPA) áztatott törökendővel történő óvatos áttörésével.

5. A Tonguetip biztonságos tisztításával kapcsolatos további információkat a Lenire felhasználói kézikönyv tartalmazza.

Tárolás, szállítás és karbantartás

A Tonguetip eszköz a mellékelt Lenire hordtakban tárolja, mivel azt kifejezetten úgy alakították ki, hogy védelmet biztosítson tárolás és szállítás közben.

Heti rendszerességgel szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy nincs-e nyoma a Tonguetip elszíneződésnek vagy sérülésnek.

Ha az ellenőrzéseket követően bármilyen kételje merül fel, hagyja abba a készülék használatát, és kérjen segítséget az ügyfélszolgálatról.

Español

Introducción

Si su médico le ha prescrito el sistema Lenire® con el fin de aliviar los síntomas de los acúfenos crónicos y subjetivos. Consulte detenidamente el manual de usuario de Lenire antes de utilizar el dispositivo. En estas instrucciones se muestra cómo utilizar y conservar su Tonguetip® TP-101. El Tonguetip TP-101 debe utilizarse únicamente junto con el sistema Lenire.

Uso previsto

El dispositivo Tonguetip es un accesorio del sistema Lenire y está diseñado para utilizarse conjuntamente.

Contraindicaciones

⚠ No utilice el dispositivo si...

- Si tiene un marcapasos, un desfibrilador o cualquier otro dispositivo implantable activo, a menos que se lo indique un médico.
- Si está embarazada, a menos que se lo indique un médico.
- Si sufre epilepsia o cualquier otra enfermedad que pueda provocar una pérdida del conocimiento.
- Si sufre cualquier enfermedad que altere la sensibilidad de la lengua.
- Si tiene lesiones, heridas o inflamaciones en la cavidad bucal, a menos que se lo indique un médico.

Riesgos relacionados con el uso

Los posibles riesgos relacionados con el uso del dispositivo Lenire son los siguientes:

- El contacto entre el Tonguetip y los retenedores dentales o los empastes metálicos puede causar molestias temporales.

IP67

Grado de protección (IP): Describe la eficacia con la que se cierra un envase.

El dispositivo no debe desecharse como residuo doméstico.

El Tonguetip proporciona un alto grado de protección contra las descargas eléctricas.

Límites de temperatura en el almacenamiento y el transporte. El límite inferior es de -20 °C, y el superior, de 45 °C.

Límites de humedad en el almacenamiento y el transporte. El límite inferior es del 5 %, y el superior, del 85 %.

Este símbolo significa que se cumplen las directivas de la UE aplicables.

Descripción técnica

Consulte la descripción técnica del dispositivo en el manual de usuario de Lenire.

Cómo funciona el Tonguetip

Tonguetip es un producto sanitario accesorio que, cuando se conecta al mando Lenire, proporciona una suave estimulación eléctrica en la lengua mediante la colocación de electrodos en la punta de esta. Su médico ajustará el nivel de estimulación a su configuración personal.

Si el envase presenta daños, no deberá utilizar el Tonguetip y deberá devolverlo al punto de venta.

Debe limpiar el Tonguetip antes de utilizarlo y conectarlo por primera vez. Consulte la sección «Limpieza» para obtener más información.

Cómo usar el Tonguetip

- Abra la funda protectora del Tonguetip.
- Debe conectar el Tonguetip enchufándolo al puerto del mando.
- Una vez conectado, el indicador del Tonguetip debería cambiar de azul a verde.

4. Debe colocar el Tonguetip en la boca, detrás de los dientes frontales superiores (en la parte superior de la lengua hacia la parte delantera de la boca) con los electrodos mirando hacia abajo.

5. Al cerrar la boca, los electrodos deben hacer contacto con la punta de la lengua y mantenerse ahí de manera cómoda.

6. Una vez que se haya producido el contacto con la lengua de forma correcta, el indicador del Tonguetip dejará de parpadear (se iluminará en verde sin parpadear).

Para una mayor

Português

Introdução

O seu médico prescreveu o Sistema Lenire® para a sua utilização a fim de aliviar os sintomas de tinnitus crónica e subjetiva. Leia atentamente o Manual do Utilizador Lenire antes de usar. Estas instruções irão mostrar-lhe como utilizar e cuidar do seu Tonguetip TP-101. O Tonguetip TP-101 só deve ser utilizado em conjunto com o Sistema Lenire.

Utilização pretendida

O dispositivo Tonguetip é um acessório, e destina-se a ser utilizado com o Sistema Lenire.

Contraindicações

Não utilize o dispositivo se...

- Se tiver um pacemaker, desfibrilador ou qualquer outro dispositivo ativo implantável, a menos que indicado por um médico.
- Se estiver grávida, a menos que indicado por um médico.
- Se sofrer de epilepsia ou de qualquer outra condição que possa resultar em perda de consciência.
- Se sofrer de qualquer condição que provoca sensibilidade reduzida da língua.
- Se tiver lesões, úlceras ou inflamações na cavidade oral, a menos que indicado por um médico.

Riscos associados com a utilização

Os potenciais riscos associados com a utilização do dispositivo Lenire incluem:

- O contacto entre o Tonguetip e os retentores dentários ou os enclinhamentos metálicos causarem desconforto temporário.

• Algumas pessoas podem sentir uma reação alérgica leve aos materiais no dispositivo. Nota: Os elétrodos do Tonguetip contêm níquel. Pode ter uma sensação de dormência leve ou um desconforto na língua durante o tratamento. Se isto acontecer, reduza a estimulação da língua. Se os sintomas persistirem, contacte o seu médico.

Avisos

- Não utilize o Tonguetip enquanto dorme ou sob a influência de álcool ou outras substâncias que provoquem sonolência.
- Mantenha o Tonguetip fora do alcance das crianças, para evitar possíveis perigos de sufocação e estrangulamento.
- To evitar o risco de contaminação cruzada, o Tonguetip não deve ser partilhado com ninguém.
- Se tiver lesões, úlceras ou inflamações, suspenda a utilização do dispositivo até os sintomas serem resolvidos.

Rótulo da embalagem

- Não utilize se o condicionamento estiver danificado.
- Consulte o Manual do utilizador.
- Avisos e precauções associados com este dispositivo médico.
- Dados do fabricante.
- O Número de lote do dispositivo.
- O Número de modelo do dispositivo.

IP67

Grau de proteção IP: Descreve até que ponto um invólucro é eficientemente encerramento.



O dispositivo não deve ser eliminado junto do lixo doméstico.



O Tonguetip fornece um grau elevado de proteção contra choques elétricos.



Limits de temperatura durante o armazenamento e transporte O limite inferior é -20 °C, o limite superior é 45 °C.



Limits de humidade durante o armazenamento e transporte O limite inferior é 5%, o limite superior é 85%.



Este símbolo significa a conformidade com as Diretivas da UE aplicáveis.

Descrição técnica

Leia o manual do utilizador na sua totalidade para conhecer a descrição técnica do dispositivo.

Como funciona o Tonguetip

O Tonguetip é um acessório de um dispositivo médico que, quando está ligado a um controlador Lenire, fornece uma estimulação elétrica suave à língua através de elétrodos que são colocados na ponta da sua língua. O seu médico irá definir o nível de estimulação para a sua definição individual.

Se o condicionamento estiver danificado, o Tonguetip não deve ser utilizado e deve ser devolvido ao ponto de venda.

Antes de ligar e utilizar o Tonguetip pela primeira vez, deve limpá-lo. Consulte a secção de limpeza para mais informações.

Como utilizar o Tonguetip

- Abra a bolsa de proteção em que o Tonguetip é fornecido.
- O Tonguetip tem de ser ligado ao controlador, ligando a ficha na porta do controlador.
- Uma vez ligado, o indicador do Tonguetip deve mudar de azul intermitente para verde intermitente.
- O Tonguetip deve ser colocado na boca, mesmo atrás dos dentes superiores da frente (na parte superior da língua, em direção à frente da boca) com os elétrodos virados para baixo.
- De fechar a boca, os elétrodos devem entrar em contacto com a ponta da língua assentando confortavelmente.
- Uma vez feito o contacto adequado com a língua, os impulsos do indicador do Tonguetip devem parar (deve acender-se a verde sem impulsos).

Para o máximo conforto, a boca e a mandíbula devem permanecer fechadas mas relaxadas durante toda a sessão de tratamento.

Para evitar o risco de choque elétrico ou queimaduras, não ligue o Tonguetip a nenhum outro equipamento para além do controlador Lenire.

Ajustar as definições de estímulo

Recomenda-se que deixe o nível de estímulo da língua definido para o nível predefinido, a menos que:

- Tem uma sensação forte do Tonguetip que provoca desconforto. Neste caso, o nível de estímulo da língua pode ser ajustado para um nível inferior até se sentir confortável.
- Existe uma sensação na língua mais fraca do que aquela que foi sentida durante a formação inicial que recebeu como parte da preparação do dispositivo. Neste caso, o nível de estímulo da língua pode ser ajustado para um nível superior.

Limpeza

Antes de limpar o Tonguetip, certifique-se de que está desligado do controlador.

Não exponha a extremidade da ficha do Tonguetip a líquidos.

É aconselhável limpar o Tonguetip se não o utilizar durante um longo período de tempo ou após o armazenamento prolongado, ou depois da exposição a condições que possam afetar a sua higiene.

- O Tonguetip deve ser enxaguado com água ou água destilada.
- Pode utilizar o Tonguetip imediatamente após o enxagamento.

- Se não for utilizar o Tonguetip imediatamente após a limpeza, coloque-o sobre uma superfície limpa e seca e deixe secar ao ar.

- Além disso, o Tonguetip pode ser limpo esfregando suavemente as superfícies, incluindo os elétrodos e a ficha utilizando toalhetes com 70% de IPA (álcool isopropílico).

- Poderá encontrar mais informações relacionadas com a limpeza segura do Tonguetip no interior do manual do utilizador do Lenire.

Armazenamento, transporte e manutenção

- Guarde o Tonguetip na bolsa de transporte do Lenire fornecida, uma vez que foi especialmente concebida para proteger o dispositivo durante o armazenamento e transporte.

Se tiver alguma preocupação após estas inspecções, deixe de utilizar o dispositivo e solicite assistência, contactando o Apoio ao cliente.

Polski

Wstęp

System Lenire® został przepisany przez lekarza w celu zlepiania objawów chronicznych, subiektywnych szumów usznych. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją użytkowania systemu Lenire. W tej instrukcji opisano sposób użytkowania i pielęgnacji urządzenia Tonguetip® TP-101. Z urządzenia Tonguetip TP-101 należy korzystać jedynie z systemem Lenire.

Przeznaczenie

Urządzenie Tonguetip stanowi akcesorium systemu Lenire i jest przeznaczone do użycia wraz z nim.

Przeciwwskazania

Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli...

- Korzystanie z rozrusznika serca, defibrylatora lub innego aktywnego, wszczepialnego urządzenia, o ile lekarz nie zalecił inaczej.
- Ciąża, o ile lekarz nie zalecił inaczej.
- Epilepsja lub inne schorzenia, które powodują utratę świadomości.
- Schorzenia, które powodują zaburzenie wrażliwości języka.
- Patologiczne zmiany, rany lub stany zapalne w jamie ustnej, o ile lekarz nie zalecił inaczej.

Ryzyko związane z użytkowaniem

Potencjalne ryzyko związane z użytkowaniem urządzenia Lenire:

- Kontakt urządzenia Tonguetip z aparatami retencyjnymi lub metalowymi elementami może powodować chwilowy dyskomfort.

U niektórych osób może wystąpić łagodna reakcja alergiczna na materiał, z których wykonano urządzenie. Uwaga: Elektrody w urządzeniu Tonguetip zawierają nikiel. Podczas leczenia może wystąpić łagodne mrówienie lub dyskomfort na języku. W takim przypadku należy zredukować poziom stymulacji językowej. Jeśli objawy nie ustąpią, należy skonsultować się z lekarzem.

Ostrzeżenia

- Nie należy korzystać z urządzenia Tonguetip podczas snu, po spożyciu alkoholu lub innych substancji, które wywołują senność.
- Urządzenie Tonguetip należy trzymać poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć ryzyka zadławienia lub uduszenia.
- Aby uniknąć ryzyka zanieczyszczenia krzyżowego, z urządzenia Tonguetip nie powinny korzystać inne osoby.
- W przypadku wystąpienia zmian, ran lub stanów zapalnych w jamie ustnej należy zaprzestać użytkowania urządzenia aż do ustąpienia objawów.

Etykietowanie opakowań

- Jeśli opakowanie zostało uszkodzone, nie należy korzystać z urządzenia.
- Zapoznaj się z instrukcją użytkowania.
- Ostrzeżenia i środki ostrożności związane z niniejszym urządzeniem medycznym.
- Dane producenta.
- Numer parti urządzenia.
- Numer modelu urządzenia.

IP67

Stopień ochrony IP: Określa, jak skutecznie uszczelniono obudowę urządzenia.



Nie można używać urządzenia wraz z odpadami z gospodarstwa domowego.



Urządzenie Tonguetip zapewnia wysoki stopień ochrony przed porażeniem prądem.



Limity temperatury przechowywania i transportu Limit wynosi od -20 do 45°C.



Limity wilgotności podczas przechowywania i transportu Dolny limit wynosi 5%, a górny 85%.



Ten symbol oznacza, że produkt jest zgodny z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej.

Opis techniczny

Aby zapoznać się z opisem technicznym urządzenia, należy przeczytać instrukcję użytkowania urządzenia Lenire.

Działanie urządzenia Tonguetip

Urządzenie Tonguetip to akcesorium do urządzenia medycznego, które w połączeniu z kontrolerem Lenire zapewnia delikatną, elektryczną stymulację języka za pomocą elektrod umieszczonej na kośćce językowej. Lekarz ustawia poziom stymulacji dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Jeśli opakowanie jest uszkodzone, nie należy korzystać z urządzenia Tonguetip i trzeba wrócić je do punktu sprzedaży.

Przed pierwszym podłączeniem i użyciem urządzenia Tonguetip należy je wyczyszczyć. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z sekcją poświęconą czyszczeniu.

Sposób korzystania z urządzenia Tonguetip

- Należy otworzyć ochronne opakowanie, w którym dostarczono urządzenie Tonguetip.

- Urządzenie Tonguetip należy połączyć z kontrolerem, podłączając ją do portu kontrolera.

- Gdy urządzenie Tonguetip zostanie połączone, jego wskaźnik powinien zmienić kolor na pulsującego niebieskiego na pulsujący zielony.

- Urządzenie Tonguetip należy umieścić w ustach, tuż za górnymi przednimi zębami (na czebiku języka, kierując ją do przodu język), elektrodami w dół.

- Gdy usta są zamknięte, elektrody powinny dotykać końca języka i wygodnie na nim spoczywać.

- Gdy elektrody zostaną prawidłowo umieszczone na języku, wskaźnik urządzenia Tonguetip powinien przestać pulsować (powinien świecić zielonym światłem ciągły).

Aby uzyskać maksymalną wygodę, podczas sesji leczniczej należy się odprężyć, nie otwierając ani szczerk.

Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem lub poparzenia, nie należy podłączać urządzenia Tonguetip do urządzeń innych niż kontroler Lenire.

Dostosowywanie ustawień bodźca

Zaleca się korzystanie z domyslnego poziomu bodźca stymulującego język, o ile nie występują poniższe czynniki:

- Silne uczucie stymulacji generowane przez urządzenie Tonguetip, które powoduje dyskomfort. W tym przypadku można obniżyć poziom bodźca stymulującego język tak, aby nie powodował dyskomfortu.
- Słabsze uczucie stymulacji niż to dozwolone podczas początkowego szkolenia przeprowadzonego w ramach dopasowywania urządzenia. W tym przypadku można podwyższyć poziom bodźca stymulującego język.

Czyszczenie

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia Tonguetip należy upewnić się, że zostało odłączone od kontrolera.

Nie wolno narażać wtyczki urządzenia Tonguetip na działanie cieczy.

Czyszczenie urządzenia Tonguetip zaleca się w przypadku, gdy było ono nieużywane lub przechowywane przez dłuższy czas albo zostało wystawione na działanie czynników, które mogły negatywnie wpłynąć na jego higienę.

- Urządzenie Tonguetip należy dokładnie opłukać zwykłą lub destylowaną wodą.
- Z urządzenia Tonguetip można również korzystać od razu po jego opłukaniu.
- Jeśli nie zamierzasz korzystać z urządzenia Tonguetip bezpośrednio po jego czyszczeniu, umieść je na czystej, suchej powierzchni i pozostaw do wyschnięcia.
- Urządzenie Tonguetip można również czyszczyć za pomocą śliczeczek nasączonych alkoholem izopropylowym (IPA) o stężeniu 70%, delikatnie przecierając jego powierzchnię, w tym elektrody i wtyczkę.
- Więcej informacji na temat bezpiecznego czyszczenia urządzenia Tonguetip można znaleźć w instrukcji użytkowania urządzenia Lenire.

W razie jakichkolwiek wątpliwości podczas takiej kontroli należy zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się z obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

English

Introduction

Your clinician has prescribed the Lenire® System for your use to alleviate the symptoms of chronic, subjective tinnitus. Please read the Lenire User Manual carefully before use. These instructions will show you how to use and care for your Tonguetip® TP-101. The Tonguetip TP-101 should only be used in conjunction with the Lenire System.